


Baby Shuttle

Baby Shuttle

Transport Kuvöz



GINEVRI
Quality for life

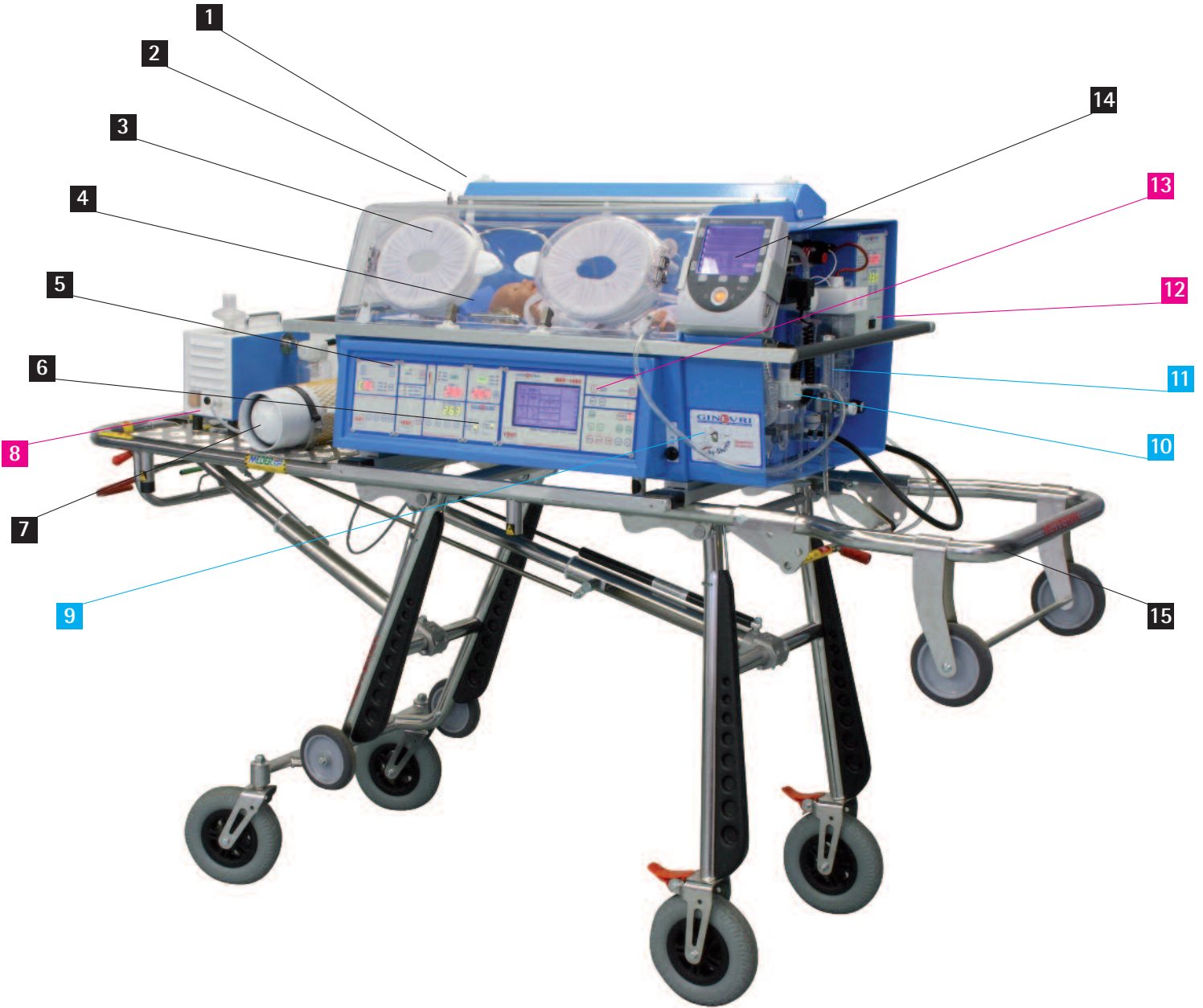

Ana gövdeye, istenilen tipde ve sayıda ilave modüller eklenebilir. Transport kuvöz, normal bakım, özel bakım ve yo un bakım olarak üç farklı seçenek sunar, ilave edilebilen modüller ile



NORMAL BAKIM


ÖZEL BAKIM

YO UN BAKIM

L

Seçilen modülden ba ımsız olarak, Baby Shuttle da ayrıca servo kontrollü Hava sıcaklı ı, trendelenburg ve 2.5 saatlik akü vardır.

Baby Shuttle Normal Bakım

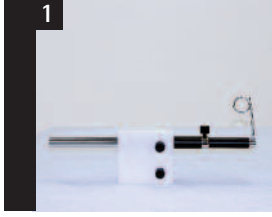

1 Serum askısı




2 Hareketli raf



3 Çift duvar



4 Kafa sabitleyici

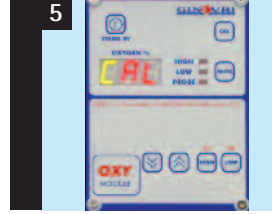

5 O2 modülü
Hood içindeki ve ventilatör
hasta deversindeki O2
konsantrasyonu izlenir




6 Cilt modülü
Cilt sıcaklığı ölçülür



7 O2 silindiri
(3 veya 5 L)



14 Pulsoksimetre

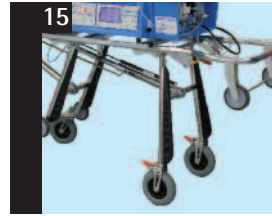


15 Ta ıyıcı ayak
Standart, kendinden katlanan
ve helikopter için olan
modeller vardır


Baby Shuttle Özel Bakım



9 Baby Start
Neonatal manuel resusitator
Reanimasyon, maske
veya endotrakiyel tüp ile
pozitif basınçla yapılır.
Manuel kontrol, serbest
ekspirasyon. PIP ve PEEP
ayrı ayrı ayarlanabilir ve
manometrede gösterilir.

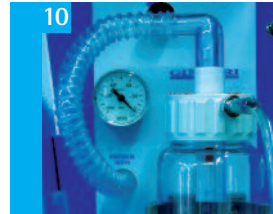

10 Aspirasyon ünitesi
Vakum düzeyi ayarlanır.

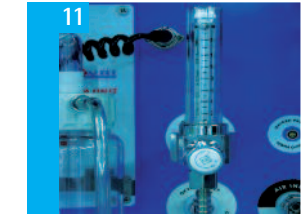


11 Oksijen Terapi

Baby Shuttle Yo un Bakım




8 Kompresör / Aspiratör

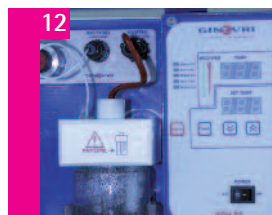

12 Nemlendirici



13 MOG 1000
Sürekli akı , neonatal acil
respiratör, Ventilasyon
Modları; CPAP, IPPV, SIMV
tetikleme ile

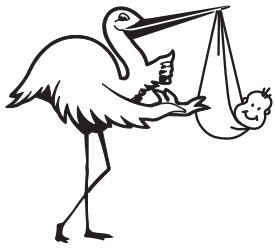

Baby Shuttle

Teknik Özellikler

Transport Kuvöz , Baby Shuttle, CEI EN 60601-1 ve CEI EN 60601-2-20 regülasyonuna göre üretilmiş tir ve Tıbbi Cihazlar Direktifi, 93/42/CEE ve bununla ilgili ilavelere uyar. Havayolu transportu için, Italian Airplane Registration (RAI) tarafınca onaylanmış tir.

Mikro i meci

Hava Sıcaklığı , servo kontrol

Batarya ile çalışır

Alarmlar

Yatak tildi

Gürültü

Mak. CO2

Kapılar

Materyel

Maks. Yük

Boyutlar

Ağırlık (Kuvöz+36Ah akü)

Ağırlık (Sadece ayak)

Güç kaynağı

Sınıf

GINEVRI

Quality for life

GINEVRI srl

Via Cancelleri, 25/b

00041 Albano Laziale

(Roma) - Italy

Tel: +39 06 93459 330

Fax: +39 06 93 459 393

E-mail: xport@ginevri.com

www.ginevri.com

Evet

20-38 ° C (0.8 ° C basamakla)

2,5 saat (tam otomatik iken)

Yüksek ve düşük Sıcaklık, Maks. Sıcaklık

Fan, ana ve düşük batarya hataları,

+ 12°

< 50 dB

<0.5%

1 ana, 2 port deliği, 1 yan

Gövde alüminyum, hood fleksibilite

10 Kg

100x54x49cm

50 Kg

15 - 30 Kg

230V 50/60HZ, 12VDC, 22A, Internal Battery 36Ah
490W (Normal), 530W (Special), 580W (Intensive)

I B

Quality System

ISO 9001: 2008

ISO 13485: 2003

CERT.IT - 37100

CE
0051

Authorized Distributor

Binas Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkan Sok.

Bilas Sitesi, C Blok, 3/1, D.7, 34384, İstanbul

Tel: 0212 2215929, Faks: 0212 2216776

binas@binasmedikal.com - www.binasmedikal.com