




Accutron CT-D

BT Enjektör pompası, çift kafalı

COMPUTED TOMOGRAPHY

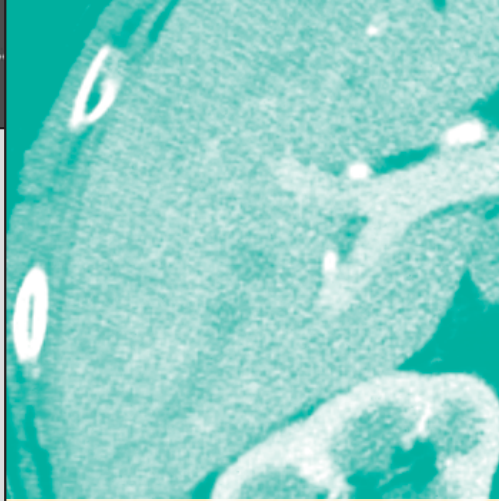

0 40 0 2.0

Accutron CT-D

Uygulama

- BT uygulamalarında kontrast madde ve salin solusyonu vernek için, kablosuz, tam dijital, programlanabilen, çift kafalı enjektör

Enjektör konsepti

- Elektronik olarak çalıştırılan, iki ıringa ve iki kafalı ünite
- Çok fazlı, program kontrollü, kontrast madde ve salin enjeksiyonu
- Alüminyum kasa
- Dahili ısıtma sistemi
- Kolay doldurma 200ml
- KVO özelliği
- Dokunmatik ekranlı kumanda paneli
- Enjektör parametrelerinin veya basınç grafiklerinin izlenmesi
- Basılabilir ve durma için el kumandası
- Manuel piston hareketi için manuel kol

Mekanik tasarım

- Çıkarılabilen, hareketli enjeksiyon kolu mobil ünite
- Emniyetli enjeksiyon pozisyonu, 15 derece açı verme
- Toplam ağırlık maks. 26Kg

Güç kaynağı

- Ana güç kaynağından 220VAC 50HZ
- Güç tüketimi 100VA'dan az

Hafıza kapasitesi

- 80 injection profiles can be defined and stored by the user

İringanın doldurulması

- Hacim girişi ile menüden otomatik doldurma veya manuel doldurma değişik hızlarda
- Doldurma hızı 1-5 ml/sn.
- Kontrol valfleri ile en uygun yüksek basınçlı tüp sistemi

Enjeksiyon parametreleri

Maks. enjeksiyon hacmi

- 2 x 200 ml

Kısmi enjeksiyon hacmi

- 1 ml basamakla, programlanan 1-200 ml

Maks. basınç

- 21 bar (304 psi), programmable from 5 to 21 bar in increments of 1 bar (72.5 to 304 psi in 14.5 increments)

İringa enjektörünün akı hızı

- 0.1-10ml/sn. arası programlanan hız 0.1sn basamakla
- Akı hızı girişi veya faz süresi

Faz sayısı

- 1 to 6

Enjektör gecikmesi

- 0 - 255 s

Faz gecikmesi

- 0 - 255 s

Scan gecikmesi

- 0 - 255 s

Uzaktan kumanda

- Kablosuz, dokunmatik ekranlı uzaktan kumanda
- Enjektör parametrelerini veya basınç eğrilerini izleyebilme

Opsiyonlar

- Doldurulmuş ıringa kullanabilme
- Arabirim/arabirim açabilme
- Tavan askısı
- Sürekli kullanım için güç ünitesi



0535

Teknik değişiklikler yapılabilir

© 2009 MEDTRON AG

Türkiye Temsilcisi:
Bina Medikal Sistemler
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0212 2215929
Faks: 0212 2216776
binas@binasmedikal.com
www.binasmedikal.com

MED (TRON)[®] AG

Hauptstraße 255

D-66128 Saarbrücken

Phone: +49 681 97017-0

Fax: +49 681 97017-20

E-Mail: info@medtron.com

Internet: www.medtron.com

DIN EN ISO 9001 / DIN EN ISO 13485